




Sharpsafe® 1 Litre

SHA-41602610

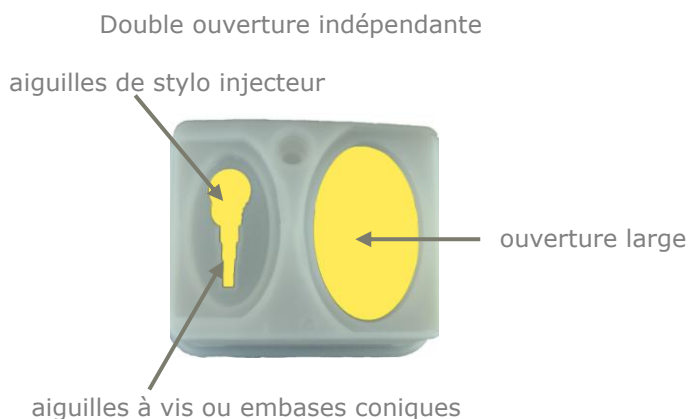

Caractéristiques

- Boîte composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide.
- Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics ».
- Dispositifs de désolidarisation de tous types d'aiguilles + embase de stylo injecteur.
- Double ouverture indépendante : ouverture totale large + ouverture avec dispositifs de déconnexion.
- Possibilité de bloquer les 2 volets sur les côtés en position ouverte.
- Fermeture double position provisoire et définitive sur les 2 volets.
- Réouverture de la position provisoire d'une simple pression du doigt sur les 2 volets.
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide.
- Volume de protection de la main de l'utilisateur matérialisé par un espace de 4cm entre le trait de jauge et la base de l'orifice d'introduction.
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage.
- Instructions d'utilisation en français sur l'étiquette.
- Munie d'une poignée pour le transport.
- Utilisable de façon mono manuelle.
- Adaptable sur plateaux de soins double et triple bac pour une utilisation au plus près du soin.
- Accessoires de fixation : bases repositionnables, supports chariots, supports muraux.
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert.
- Conforme ADR, BS7320, NFX30-500 et Titulaire de la Marque NF302 (détail au verso).
- Origine du produit : Union Européenne.

Informations techniques

- | | |
|--|-------------------|
| • Matériaux : | Polypropylène |
| • Capacité réelle : | 1 L |
| • Capacité utile : | 0,8 L |
| • Dimension de l'ouverture large: | 55 x 35 mm |
| • Dimensions couvercle monté (HxLxl) : | 180 x 108 x 90 mm |
| • Poids : | 0,126 kg |



Accessoires

Référence	Désignation	Matériaux	Conditionnement
• SHA-42530001	Base repositionnable 1L	Polypropylène	Carton de 50
• SHA-48000000	Support chariot « easy lock » 1/2/3/4/7 Litres	Polypropylène + acier	Unité
• SHA-48000001	Support medirail « easy lock » 1/2/3/4/7 Litres	Polypropylène + acier	Unité
• SHA-48000002	Support mural « easy lock » 1/2/3/4/7 Litres	Polypropylène + acier	Unité
• DLX-BRACKET20-30	Support chariot « easy fix » 1/2/3/4/7L barre 20-30mm	Acier + caoutchouc + embouts rouges	Unité
• DLX-BRACKET30-40	Support chariot « easy fix » 1/2/3/4/7L barre 30-40mm	Acier + caoutchouc + embouts bleus	Unité
• SHA-42610000	Support chariot à vis 1L barre verticale	Acier inoxydable	Unité
• SHA-42630000	Support chariot à vis 1L barre horizontale	Acier inoxydable	Unité
• SHA-42620000	Support mural à vis 1L	Acier inoxydable	Unité
• SHA-42600000	Support crochet 1L	Acier inoxydable	Unité
• SHA-43000000	Plateau de soin deux alvéoles pour 1/2/3L	Polypropylène	Carton de 10
• SHA-43010000	Plateau de soin trois alvéoles pour 1/2/3L	Polypropylène	Carton de 10

Conditionnement

• Quantité par carton :	100
• Dimension carton (HxLxl) :	428 x 540 x 380 mm
• Poids :	13,7 kg
• Volume :	0,088 m ³
• Nombre cartons par palette :	20
• Dimensions de la palette :	251 x 120 x 80 cm
• Poids de la palette :	294 kg

Conformité



La norme NF X30-500 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité.



La marque NF 302 assure le respect continu des standards définis par la norme NF-X-30-500. Le "Laboratoire National d'Essais" vérifie régulièrement la qualité des produits sur le marché



La norme BS 7320 (British Standard) a défini des standards rigoureux en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité. La Norme BS 7320 est certifiée via Kitemark.



En conformité avec A.D.R. et UN 3291 : Norme internationale sur le transport des Marchandises Dangereuses par la Route



Recommandations allemandes pour le traitement des déchets infectieux biologiques



Autoclavable à 134°C pendant 18 min.



ISO 9001 : 2000 : norme qualité



ISO 14001 : norme environnementale